

STARTA HÄR

Capitainer® B¹⁰

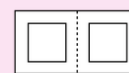
Bruksanvisning
Blodprovstagningsskit

INKLUDERAT I PROVTAGNINGSSKITET

Endast för engångsbruk



(a)
Capitainer® B10
provtagningsskort



(b)
Desinfektions-
servett (x2)



(c)
Engångs-
lansett (x2)



(d)
Kompress



(e)
Plåster x2



(f)
Capitainer®
returfordral

Ytterligare saker du behöver:

- Ett prov-ID från din testleverantör
- Instruktioner för hur du returnerar ditt prov till laboratoriet



Prov-ID

01 FÖRBEREDELSE

02 PROVTAGNING

03 PACKA & SKICKA

01

FÖRBEREDELSE

VIKTIGT

- Använd provtagningsskortet inom 30 minuter från att du har öppnat förpackningen.
- Böj eller vrid inte provtagningsskortet.
- Låt kortet ligga kvar på bordet under provtagningen.

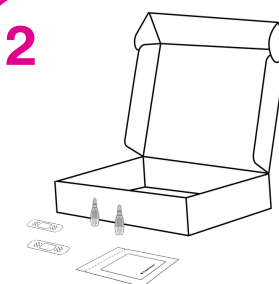
1



Läs detta först

- Läs igenom hela instruktionen innan du börjar.
- Skanna QR-koden för instruktionsvideo.

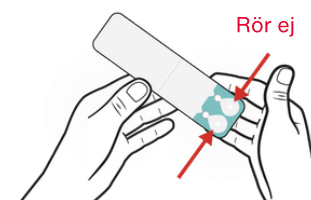
2



Förbered material

- Stå eller sitt vid ett bord.
- Placera allt material på bordet.
- Öppna förpackningarna till provtagningsskortet (a), kompressen (d) och plåstret (e).

3



Förbered kort

- Öppna fliken på provtagningsskortet (a).
- Rör inte provbrunnarna.
- Placera kortet på bordet.

02

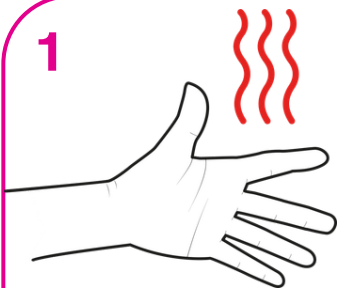
PROVTAGNING

Varma händer är viktigt för ett bra blodflöde.

Du kan:

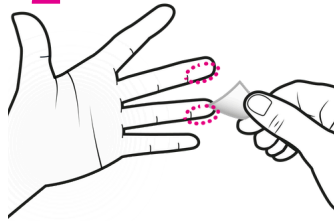
- Röra på dig
- Hålla i en varm kopp
- Hålla handen i varmt vatten

1

**Värm händerna**

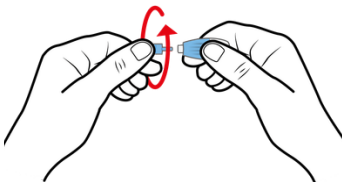
- Värm handen i 2–3 minuter.
- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten.
- Torka händerna med en ren handduk.

2

**Förbered finger**

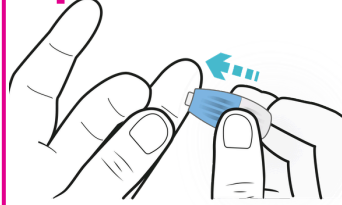
- Välj lång- eller ringfingeret.
- Rengör fingret med desinfektionsservetten (b).
- Låt fingret lufttorka i 15 sekunder.

3

**Förbered lansett**

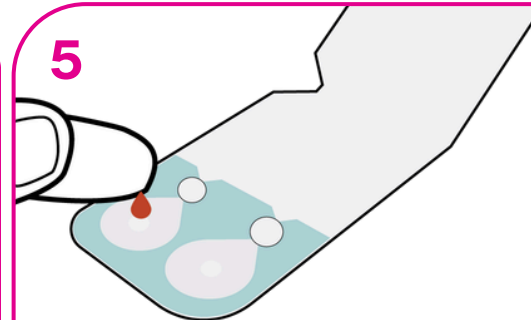
- Vrid av lansettens lock (c), dra inte.

4

**Stick i fingret**

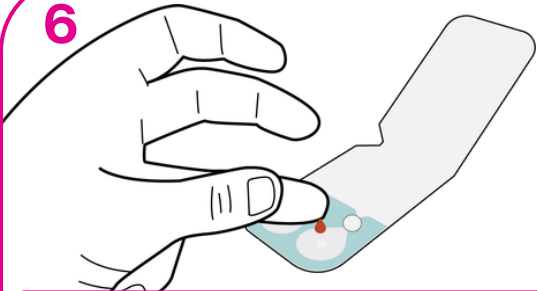
- Tryck tummen mot fingertoppen.
- Placera lansetten (c) mot sidan av fingertoppen.
- Tryck bestämt för att aktivera lansetten.

5

**Fyll ena provbrunnen**

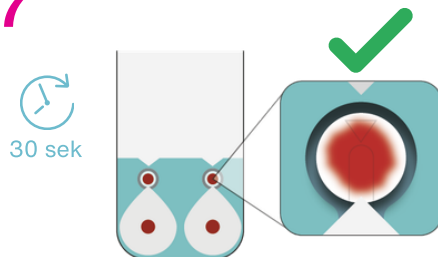
- Släpp trycket från tummen och torka bort den första bloddroppen med kompressen (d).
- Låt en ny, **stor** bloddroppe bildas.
- ⚠ För liten droppe = misslyckad provtagning.
- Placera den **stora** bloddroppen i provbrunnen.
- Använd endast en droppe. Fler droppar ger ett felaktigt provsvar.

6

**Fyll den andra provbrunnen**

- Låt en ny, **stor** bloddroppe bildas.
- Placera den **stora** bloddroppen i andra provbrunnen.
- Stoppa blödningen med kompressen (d).
- Sätt på plåstret (e).

7

**Kontrollera kontrollfönstret**

- Efter cirka 30 sekunder ska kontrollfönstret visa röd färg. Det visar att provtagningen har lyckats.

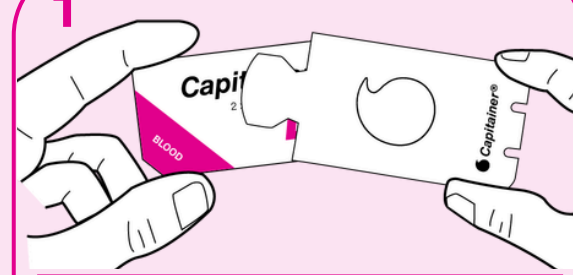
03 PACKA & SKICKA

03

PACKA & SKICKA

Släng allt använt material.

1

**Slutför**

- Märk ditt provtagningskort (a).
- Stäng locket och placera provtagningskortet i returfodralet (f).
- Stäng fliken.
- Skicka tillbaka ditt prov enligt anvisningarna från din testleverantör.