

STARTA HÄR

Capitainer® B⁵⁰


Bruksanvisning
Blodprovstagningsskit

INKLUDERAT I PROVTAGNINGSSKITET

Endast för engångsbruk



(a)
Capitainer® B50
provtagningskort

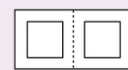

(b)
Desinfektions-
servett (x2)



(c)
Engångs-
lansett (x2)



(d)
Kompress



(e)
Plåster (x2)



(f)
Capitainer®
returfodral

Ytterligare saker du behöver:

- Ett prov-ID från din testleverantör
- Instruktioner för hur du returnerar ditt prov till laboratoriet



Prov-ID

01 FÖRBEREDELSE

02 PROVTAGNING

03 PACKA & SKICKA

01

FÖRBEREDELSE



VIKTIGT

- Använd provtagningsskortet inom 30 minuter från att du har öppnat förpackningen.
- Böj eller vrid inte provtagningsskortet.
- Låt kortet ligga kvar på bordet under provtagningen: **Håll inte i det.**


1



Läs detta först

- Läs igenom hela instruktionen innan du börjar.
- Skanna QR-koden för instruktionsvideo.


2

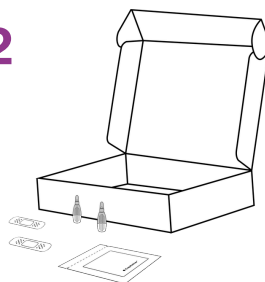

Förbered material

- Stå eller sitt vid ett bord.
- Placera allt material på bordet.
- Öppna förpackningarna till provtagningsskortet (a), kompressen (d) och plåstret (e).

3

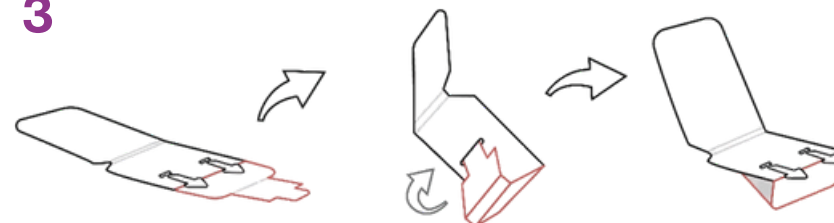

Förbered kort

1

- Fäll upp fliken på provtagningsskortet (a). Rör inte kanalerna.

2

- Vik bak fliken för att skapa ett stöd.

3

- Placera kortet på bordet med kanalerna uppåt.

02

PROVTAGNING




Varma händer är viktigt för ett bra blodflöde.

Du kan:

- Röra på dig
- Hålla i en varm kopp
- Hålla handen i varmt vatten


1

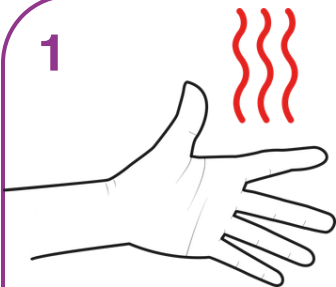

Värm händerna

- Värm handen i 2–3 minuter.
- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten.
- Torka händerna med en ren handduk.


2

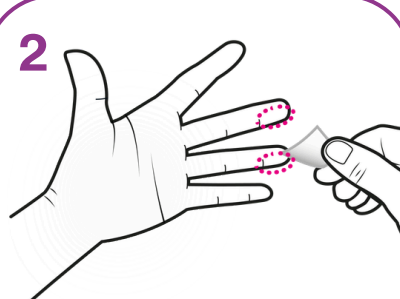

Förbered finger

- Välj lång- eller ringfingret.
- Rengör fingret med desinfektionsservetten (b).
- Låt fingret lufttorka i 15 sekunder.


3

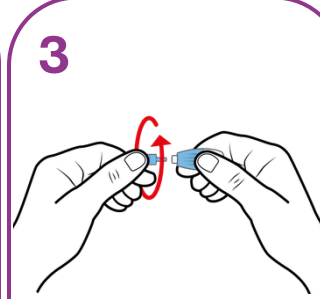

Förbered lansett

- Vrid av lansettens lock (c), dra inte.

4

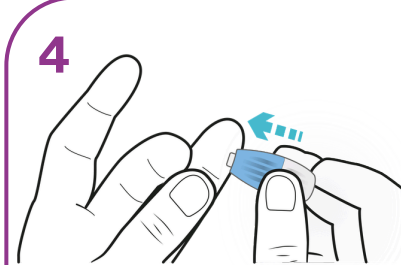


Stick i fingret

- Tryck tummen mot fingertoppen.
- Placera lansetten (c) mot sidan av fingertoppen.
- Tryck bestämt för att aktivera lansetten.
- Ett stick i fingret ska räcka för att fylla båda kanalerna.

03 PACKA & SKICKA


5

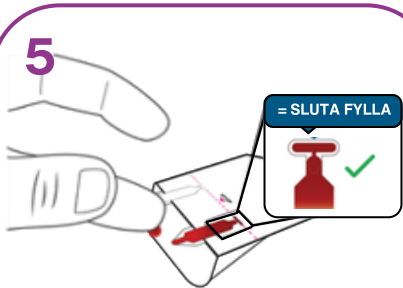

Fyll den ena kanalen

- Släpp trycket från tummen och torka bort den första blodroppen med kompressen (d).
- Låt en ny, **stor** bloddroppe bildas.
- Fyll kanalen med blod.
- Se till att blodet rinner **in i kanalen** och inte hamnar ovanpå.
- Fyll till stopplinjen med så många bloddroppar som behövs.


6

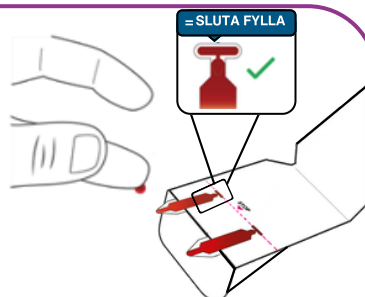

Fyll den andra kanalen

- Fyll den andra kanalen till stopplinjen med samma finger om det fortfarande blöder. **Om inte, gör ett nytt stick i ett annat finger med start från steg 1.**
- När båda kanalerna har fyllts, stoppa blödningen med kompressen (d).
- Sätt på plåstret (e).

7

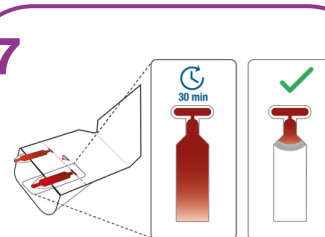

Kontrollera kontrollfönstret


Kanalerna ska tömmas inom några minuter, så som visas ovan. Om inte, vänta 30 minuter innan nästa steg.

03

PACKA & SKICKA

Släng allt använt material

1

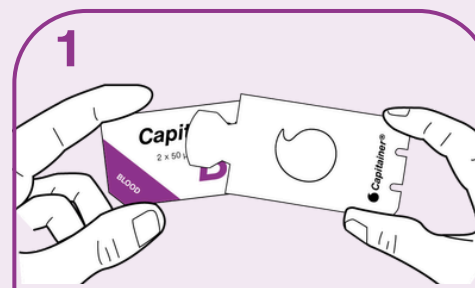

Slutför

- Märk provtagningskortet (a).
- Fäll ned stödet, dra bort skyddslappen från fliken och förslut skyddsfliken över kanalerna.
- Placera det förslutna kortet i returfordralet (f) och stäng fliken.
- Skicka tillbaka provet enligt anvisningarna från din provtagningsleverantör.