


STARTA HÄR

Capitainer® DIP70

Bruksanvisning
Urinprovstagningskit

INKLUDERAT I PROVTAGNINGSKITET

Endast för engångsbruk

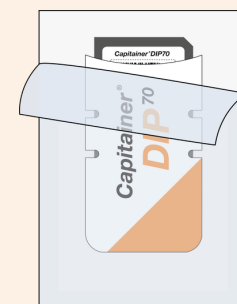


(a) Capitainer®DIP70
provtagningskort

(b) Capitainer®DIP70
returfodral



(c)
Provbehållare

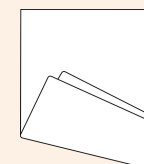

(d)
Absorberande
papper

Ytterligare saker du behöver:

- Ett prov-ID från din testleverantör
- Instruktioner för hur du returnerar ditt prov till laboratoriet



Prov-ID

01 FÖRBEREDELSE

02 PROVTAGNING

03 PACKA & SKICKA

01

FÖRBEREDELSE

VIKTIGT

- Använd provtagningskortet inom 30 minuter från att du har öppnat förpackningen.
- Rör inte provtagningsdiskarna på kortet.

1



Läs detta först

- Läs igenom hela instruktionen innan du börjar.
- Skanna QR-koden för instruktionsvideo.

2



Tvätta händerna

- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Torka dem helt torra med en ren handduk.
- Välj en plats där du kan sitta eller stå.
- Placera allt material på en ren och plan yta.


3



Öppna förpackningen

- Öppna förpackningen till provtagningskortet.
- Ta ut provtagningskort (a) och returfodral (b).

4

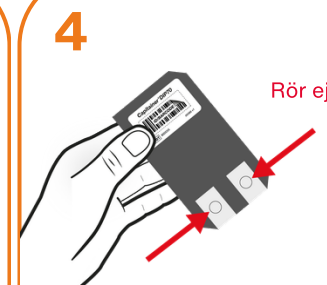

Förbered kort

- Placera provtagningskortet (a) på en ren och plan yta utan att vidröra provtagningsdiskarna.

5



Märk provtagningskortet

- Märk provtagningskortet (a) med prov-ID.


02

PROVTAGNING

VIKTIGT

- Fyll provbehållaren med tillräckligt mycket urin för att täcka provtagningsdiskarna
- Doppa bara ytan med provtagningsdiskarna i urinen

1

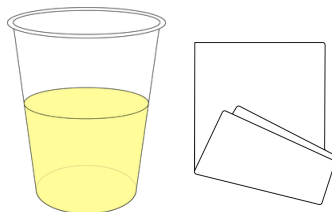

Samla urin

- Ha provbehållaren (c) och det absorberande pappret (d) tillgängligt.
- Samla urin i provbehållaren.

2


5-10 SEK



Doppa kortet

- Håll provtagningskortet (a) upprätt.
- Doppa kortet i urinen i 5–10 sekunder.

3

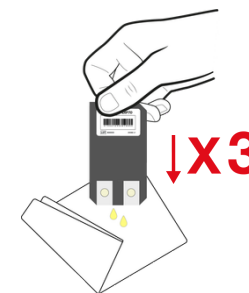

Knacka kortet 3 gånger

- Ta upp provtagningskortet (a) ur urinen.
- Knacka den doppade änden tre gånger mot det absorberande papperet (d) för att ta bort överflödig urin.


03 PACKA & SKICKA

03

PACKA & SKICKA

Släng allt använt material

1

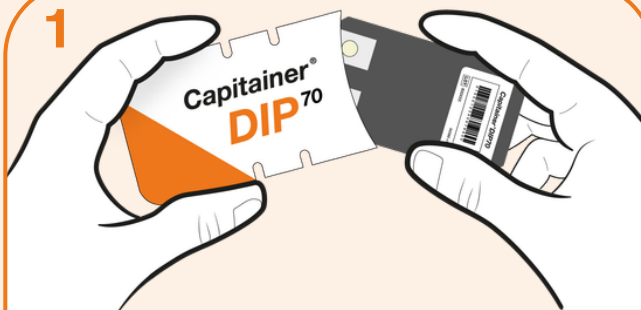

Slutför

- Lägg tillbaka kortet i returfordralet (b).
- Stäng fliken.
- Returnera provet enligt anvisningar från din testleverantör.